

OSREDOTOČEN NA LIPIDE

# Spray & Clean

Raztopina je namenjena čiščenju vseh polprepustnih kontaktnih leč (RGP). Odstranjuje obloge in ohranja kontaktne leče čiste in udobne.

## Kako uporabiti Spray & Clean?

**1. korak:** Posamezno lečo odstranite iz očesa in jo položite v svojo dlan in vsako stran kontaktne leče poškopite z enim razprškom raztopine Spray & Clean.

**2. korak:** Kontaktno lečo v svoji dlani pazljivo podrgnite s prstom oz. s prijemom dveh prstov. Kontaktno lečo vstavite v vaš nosilec kontaktnih leč in jo sperite z MENICARE PURE.

**3 korak:** Posodico za kontaktne leče napolnite z MENICARE PURE in zatesnite s pokrovčkom.

**4 korak:** Pred vstavitvijo kontaktnih leč predhodno sperite z MENICARE PURE. Kontaktne leče nato lahko nosite. Preostanek raztopine iz posodice za leče zavržite.



Sprej 15ml  
brez konzervansov

## Pogostost uporabe

Lahko se uporablja vsakodnevno pri pacientih z mastnimi solznim filmom.

## Sestava

- natrijev olefin sulfonat 0,75%
- PEG oktilfenileter 0,45%
- dinatrijev EDTA 0,02%
- prečiščena voda q.s. 100

- (1) Efficacy of rigid gas permeable contact lens multi-purpose care solutions against Acanthamoeba Simon Kilvington. University of Leicester, Leicester, UK. Poster BCLA 2014.  
(2) Test de solubilisation des lipides (source Menicon Co., Ltd).  
(3) Antimicrobial properties of a new rigid gas-permeable contact lens multipurpose solution formulated with Polylysine as disinfecting agent. Osamu Mori, MS and Megumi Toyohara, MS. R&D center, Menicon Co. Ltd., Kasugai, JAPAN. Poster BCLA 2014.  
(4) Menicon R&D report N° 914 / Menicon Pharma record N° RE05058.  
(5) Medical device testing N° 96Z008 / Menicon Pharma record N° RE05059.  
(6) Medical device testing report N° 97m010 / Menicon Pharma record N° RE050060.  
(7) Medical device testing report N° 98m054 / Menicon Pharma record RAPR9821.  
(8) Pr. Harf-Monteil report 1998 / Menicon Pharma record N° RAPR9822.  
(9) Commissariat à l'Energie Atomique rapport N° 277111 - Evaluation des protocoles de décontamination de lentilles rigides perméables pour inactiver et/ou éliminer les prions / Menicon Pharma record N° E02022.

CE 0483 MENICARE PURE proizvaja Menicon Co., Ltd, PROGENT in Spray & Clean proizvaja Menicon Pharma SAS. Prosimo pazljivo preberite navodila za uporabo pri vsakem produktu.

Za dodatne informacije se obrnite na zastopnika za Menicon v Sloveniji: Optimed d.o.o., Litostrojska 44c, 1000 Ljubljana.

 **Menicon**  
www.menicon.com

 **Menicon**

# MENICARE PURE & PROGENT



**Idealna kombinacija**  
pri negi poltrdih kontaktnih leč

Dnevno

VEČ UDOBJA ZA UPORABNIKE POLTRDIH KONTAKTNIH LEČ

Tedensko

# MENICARE PURE



Več udobja za uporabnike poltrdih kontaktnih leč

## Naravno

- polilizin
- vitamin C glukozid
- hialuronska kislina

## Čisto

- učinkovito dezinficira
- učinkovito očisti<sup>(2)</sup>

## Prečiščeno

- dvojna filtracija
- nizka stopnja toksičnosti

## Namenjeno za

- čiščenje
- dezinfekcijo: proti bakterijam in glivam učinkovit po 30 minutah<sup>(3)</sup> in deluje proti *acantamoebi* v 4 urah<sup>(1)</sup>
- shranjevanje
- spiranje

## Sestava

- polilizin 0.01%
- dinatrijev EDTA 0.05%
- HCO-60 0.1%



Pred prvo uporabo pokrovček obrnite v smeri urinega kazalca



MENICARE PURE 250 ml  
+ posodica za leče

MENICARE PURE 250 ml

# PROGENT

S tedensko uporabo boste obdržali površino kontaktnih leč v odličnem stanju


## Kako uporabiti PROGENT?

- Zmešajte en vsebnik A in en vsebnik B v PROGENT lončku za čiščenje
- Kontaktne leče namakajte 30 minut (namakanje preko 30 minut lahko razbarva kontaktne leče)
- Kontaktne leče in lonček na koncu vsaj 15 sekund spirajte z MENICARE PURE

PROGENT A: NaClO sprošča ClO<sup>-</sup> + PROGENT B: KBr



Nastane hipobromid, ki uniči proteinske verige v 30 minutah

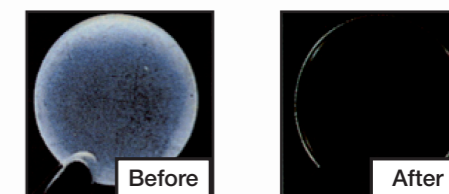

## Namenjeno za

- odstranjevanje proteinov
- intenzivno čiščenje
- dezinfekcijo: vsaj 5 minut proti virusom, bakterijam, plesnim, kvasovkam in *acantamoebi*<sup>(4, 5, 6, 7, 8)</sup>
- + dodatno proti-prionsko delovanje<sup>9</sup>

## Sestava

- vsebnik A: raztopina natrijevega hipoklorita (20,30 mg NaClO - očiščena voda 5 mL)
- vsebnik B: raztopina kalijevega bromida (30,75 mg KBr - očiščena voda 5 mL)



MENICARE PURE 70 ml  
+ posodica za kontaktne leče  
& PROGENT  
(1 vsebnik A + 1 vsebnik B)  
+ PROGENT lonček za čiščenje



Starter kit MENICARE PURE & PROGENT